


アンカーアタッチメント ダルボプラス

アンカーアタッチメント ダルボプラス

Dr.ダラ・ボナによる原理を基に、新たに開発されたアンカーアタッチメントです。メールパーツは鋳造およびろう着が可能なパロア製です。フィメールパーツは2種類の中から症例に合わせて選択可能で、エリプティックフィメールはチェアサイドでのレジン床義歯への取り付けを確実にします。フィメールに内蔵される3種類のラメラリテンションインサートにより、維持力の調整と長期に渡るフォローアップが可能となります。また、これらのフィメールパーツはインプラント補綴に対しても有効で、2.25mmの直径を持つ各種インプラントシステムのボールアンカーに対し互換性を持っています。

■対応インプラントシステム

ITI®-System、Branemark-System®、Osseotite NT®、SPI®、Astra Tech Implants、Camlog®、その他

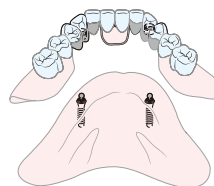

[適応症]


- インプラント支台歯の緩圧式・非緩圧式可撤性義歯
- 部分欠損義歯
- 片側が部分欠損で片側が遊離端義歯
- 維持装置を使用した片側遊離端義歯
- オーバーデンチャー

[非適応症]

- 反対側に維持装置のない片側遊離端義歯

販売名:ダルボプラス 医療機器認証番号:221AABZX00090000


ダルボプラス ベーシック

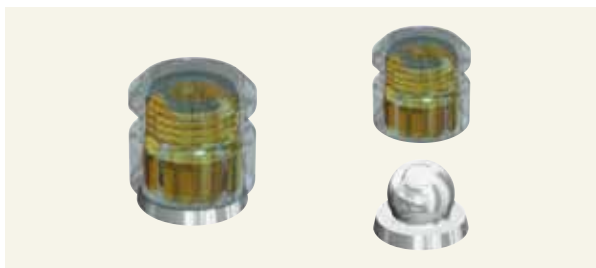

CENDRES+MÉTAUX 社

| | | | |
|------|--|----|---|
| 製品名 | ダルボプラス ベーシック | | |
| 製品番号 | 055750 | 包装 | 1 |
| 材質 | フィメール:T=チタン メール:V=パロア | | |
| 内容 | フィメールT・メールV/各1個 ラメラリテンションインサートスタンダード/1個、デュプリケーションエイド/1個 スパーサーディスク/1個 | | |

ダルボプラス エリプティック

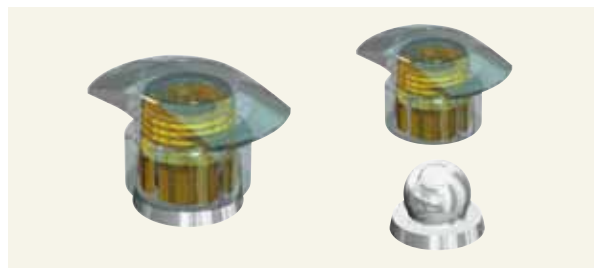


CENDRES+MÉTAUX 社

| | | | |
|------|--|----|---|
| 製品名 | ダルボプラス エリプティック | | |
| 製品番号 | 055889 | 包装 | 1 |
| 材質 | フィメール:T=チタン メール:V=パロア | | |
| 内容 | フィメールT・メールV/各1個 ラメラリテンションインサートスタンダード/1個 スパーサーディスク/1個 | | |

インストゥルメント


ダルボプラス ヒーティングロッド

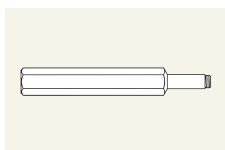

CENDRES+MÉTAUX 社

| | | | |
|------|---------------------------------|----|---|
| 製品名 | ダルボプラス ヒーティングロッド | | |
| 製品番号 | 072639 | 包装 | 1 |
| 仕様 | 加熱することで、レジン床義歯からフィメールを撤去するための器具 | | |


スクリュードライバー/アクチベーター

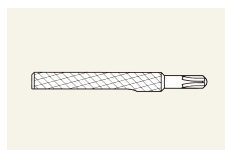

CENDRES+MÉTAUX 社

| | | | |
|------|----------------------------|----|---|
| 製品名 | スクリュードライバー/アクチベーター | | |
| 製品番号 | 072609 | 包装 | 1 |
| 仕様 | ラメラリテンションインサートの取り付けと維持力調整用 | | |

ダルボメール スペシャルマンドレル

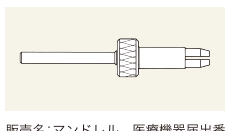


CENDRES+MÉTAUX 社

| | | | |
|------|-------------------|----|---|
| 製品名 | ダルボメール スペシャルマンドレル | | |
| 製品番号 | 072637 | 包装 | 1 |
| 仕様 | メールパーツの取り付け用 | | |

販売名:マンドレル 医療機器届出番号:27B1X00041000337

ダルボメール トランスファージグ

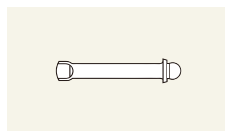

CENDRES+MÉTAUX 社

| | | | |
|------|------------------|----|---|
| 製品名 | ダルボメール トランスファージグ | | |
| 製品番号 | 070157 | 包装 | 1 |
| 仕様 | メールパーツのアナログ用 | | |

スパーサーディスク

義歯の垂直的な動きを調整し、またレジン重合時にメールとフィメールが結合するのを防ぎます。

CENDRES+MÉTAUX 社



| | | | |
|------|-----------|----|---|
| 製品名 | スパーサーディスク | | |
| 製品番号 | 050394 | 包装 | 5 |
| 材質 | スズ | | |

ダルボメールゲージ

デンチャーに装着されているフィメールの維持力を確認するためのゲージです。

CENDRES+MÉTAUX 社



| | | | |
|------|-----------|----|---|
| 製品名 | ダルボメールゲージ | | |
| 製品番号 | 07000027 | 包装 | 1 |